


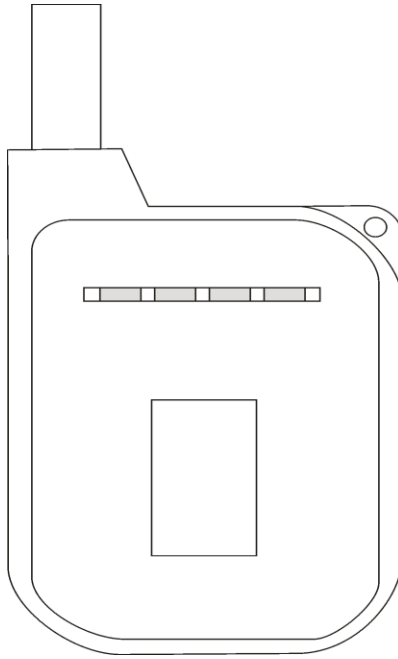

คู่มือการใช้งาน

เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์แบบพกพา

คำเตือน (โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน)

- อุปกรณ์นี้ ใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น (ตามกฎหมาย)
- อุปกรณ์นี้ ใช้สำหรับประเมินระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเบื้องต้นของตนเองเท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
- ผลการประเมินระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของตำรวจหรือหน่วยงานราชการ ถือเป็นที่สุด
- การกระทำใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้อุปกรณ์นี้เองเท่านั้น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- อุปกรณ์นี้ อยู่ภายใต้และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด


สารบัญ

1. ขั้นตอนการทำงาน-----	3
1.1 ขั้นตอนการทดสอบแบบสแตนด์โลน -----	3
1.2 การบันทึกการสอบถามและการตั้งคำถามการทำงาน -----	4
1.3 การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MAOPAO -----	5
1.4 คำอธิบายหน้าจอแสดงผล ไฟแสดงสถานะ -----	7
1.5 คำแนะนำในการชาร์จ -----	7
2. ข้อควรระวังในการใช้งาน -----	7
2.1 คำเตือนที่สำคัญ -----	7
2.2 อิทธิพลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายมนุษย์ -----	7
2.3 แอลกอฮอล์เป็นสารเคมี -----	7
2.4 แอลกอฮอล์ส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไร? -----	7
2.5 แอลกอฮอล์ส่งผลต่อการขับขีของเรอย่างไร? -----	8
3. การแก้ไขปัญหา -----	9
4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ -----	9
5. ชื่อและเนื้อหาของสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ -----	9
6. การบริการและการรับประกัน -----	10
7. พารามิเตอร์พื้นฐาน-----	10

ขอขอบคุณที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์นี้!

เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์แบบพกพา H3 เป็นอุปกรณ์คัดกรองแอลกอฮอล์ระดับมืออาชีพ ซึ่งใช้ตรวจจับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในลมหายใจ H3 ใช้เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่มีความแม่นยำสูงในการรับรู้และระบุปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยประมาณของผู้ทดสอบ และจึงโครไนซ์ผลการทดสอบผ่านบลูทูธ เพื่อตีความผลการทดสอบอย่างมืออาชีพ

โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัดแอลกอฮอล์พกพา H3 ก่อนเริ่มการทดสอบ

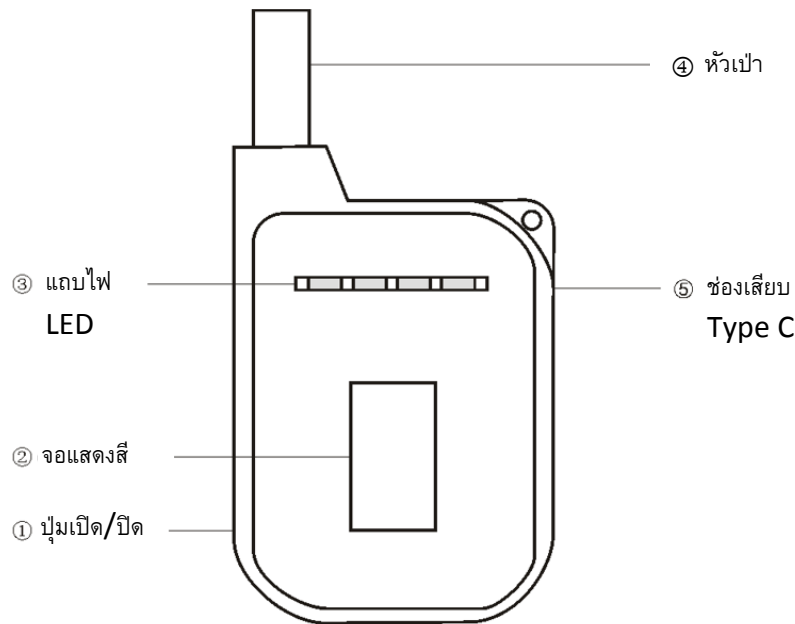

1. ขั้นตอนการทำงาน:

1.1 ขั้นตอนการทดสอบแบบสแตนด์อโลน – อุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ :

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม [เปิด/ปิด] ค้างไว้มากกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 2: ใส่หัวเป่าเข้าไปในรูที่สำรองไว้ของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการเป่าลม

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มหายใจเข้าลึกๆ เล็งไปที่ช่องเป่าลมและเป่าลมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วินาที จะมีการเตือนการสั่นสะเทือน หลังจากเริ่มเป่าลม และการสั่นสะเทือนจะหยุดลงหลังจากเป่าลมไป 3 วินาที หากระยะเวลาการเป่าลมเหลือน้อยกว่า 3 วินาทีหรือหยุดชะงักระหว่างนั้น อุปกรณ์จะแจ้งเตือนว่าการเป่าลมถูกหยุดลงและเข้าสู่ขั้นตอนการเป่าลมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากเป่าลมสำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6: หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะแสดงผลการทดสอบ ตามคำบรรยายข้อ 1.3 (ด้านล่าง)



ขั้นตอนที่ 7: กดปุ่ม [เปิด/ปิด] สั้นๆ เพื่อกลับไปยังอินเทอร์เฟซหลักและเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 8: ในขั้นตอนใดก็ตาม ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง หรือกดค้างไว้ 30 วินาที เครื่องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

1.2 การบันทึกการสอบถามและการตั้งค่าการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เกิน 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: ดับเบิลคลิกปุ่มบนอินเทอร์เฟซหลักเพื่อเข้าสู่เมนู

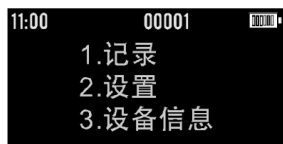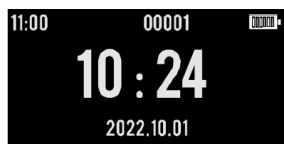

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากเลือก [1, บันทึก] แล้ว ให้ดับเบิลคลิกปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูการสอบถามบันทึก

ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุ่มเพื่อดูบันทึกการทดสอบในอดีต กดปุ่มค้างไว้เพื่อกลับ




ขั้นตอนที่ 5: คลิกเพื่อเลือก [2, การตั้งค่า] ในอินเทอร์เฟซเมนู คลิกสองครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าจอป้อนรหัสผ่าน






ขั้นตอนที่ 6: คลิกเพื่อป้อนรหัสผ่าน 909 หมายถึง: ดับเบิลคลิกเพื่อยืนยันเมื่อป้อนรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 7: กรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า

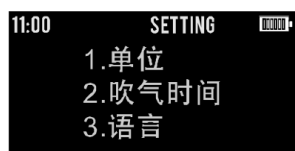

ขั้นตอนที่ 8: เลือกการตั้งค่าที่ตรงกันเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อไปนี้

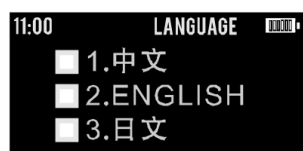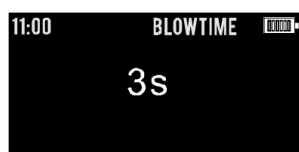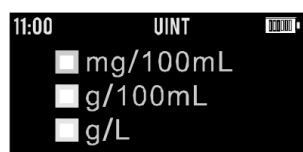

หมายเหตุ: ในการใช้งานต่างๆ

การคลิกปุ่มเพียงครั้งเดียวคือการเลื่อนเคอร์เซอร์หรือสลับตัวเลือก

การคลิกปุ่มสองครั้งเพื่อยืนยัน

การกดปุ่มค้างไว้คือการกลับไปใช้งานอีกครั้ง

1.3 การเชื่อมต่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน MAOPAO

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ Play Store หรือ Apple Store แล้วพิมพ์คำว่า **MAOPAO**


ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **MAOPAO** ลงบนโทรศัพท์มือถือ



ขั้นตอนที่ 3: เข้าสู่ระบบ กรอกริอีเมลล์ และรหัสผ่าน หากยังไม่มีบัญชี กดสร้างบัญชี (Create Account) ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4: การสร้างบัญชีผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน **MAOPAO** กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน อีเมลล์ และรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5: อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน แล้วกดลงทะเบียนสมัคร

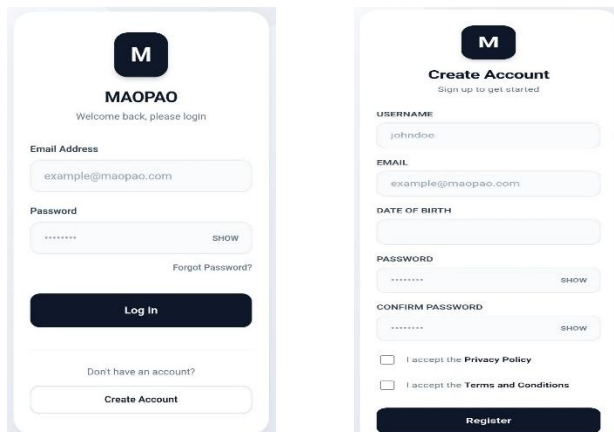

ขั้นตอนที่ 6: การเชื่อมต่อ - เปิดเครื่องอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์

ขั้นตอนที่ 7: ในแอปพลิเคชัน **MAOPAO** ไปที่เมนูอุปกรณ์ของคุณ จะแสดงชื่อ Bluetooth : MAOPAO


ทำการกดคำว่า เชื่อมต่อ




ขั้นตอนที่ 8: เริ่มการทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในแอปพลิเคชัน MAOPAO ไปที่เมนูตรวจสอบ ส่วนอุปกรณ์ กดปุ่มเปิด 1 ครั้ง เพื่อเริ่มการทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ขั้นตอนที่ 9: ทำการเป่าลมหายใจเข้าไปในอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์จนกว่าอุปกรณ์จะหยุดสิ้น

ขั้นตอนที่ 10: ในแอปพลิเคชัน MAOPAO ที่เมนูตรวจสอบ จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเป่าวัดแอลกอฮอล์

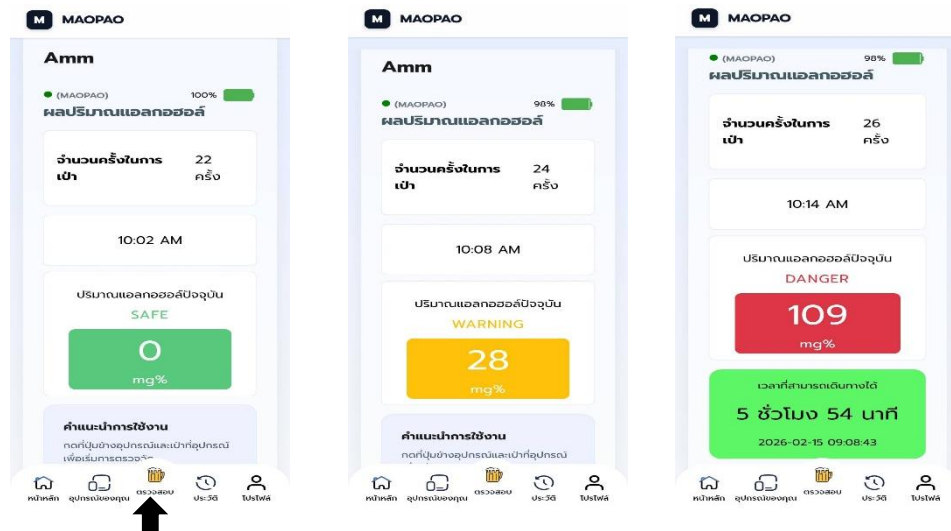

ขั้นตอนที่ 11: ในแอปพลิเคชัน MAOPAO ไปที่เมนูประวัติ แอปพลิเคชันจะทำการซิงค์ข้อมูลผลลัพธ์การเป่าทั้งหมด จากอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้าสู่แอปพลิเคชัน

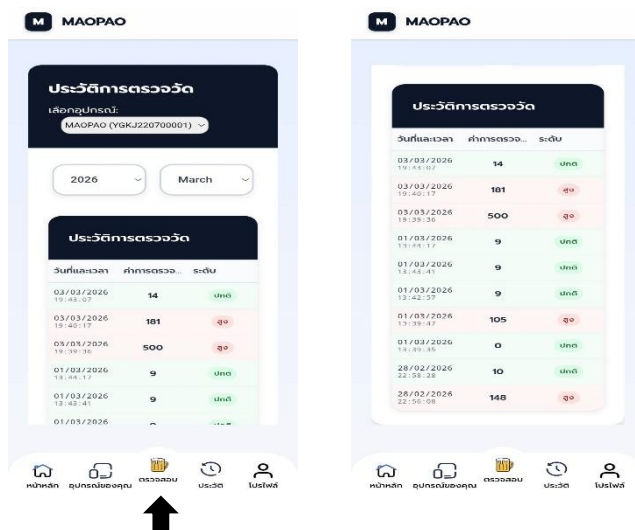

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAOPAO ได้ที่
[ในช่องค้นหา พิมพ์คำว่า MAOPAO]

- Play Store
- Apple Store

1.4 คำอธิบายหน้าจอแสดงผลและไฟแสดงสถานะ:

- แถบไฟแสดงสีเขียว: ผลการทดสอบระหว่าง 0 มก. - 19 มก./100มล. (ดี)
- แถบไฟแสดงสีเหลือง: ผลการทดสอบระหว่าง 20 มก. - 49 มก./100มล. (ดี)
- แถบไฟแสดงสีแดง: ผลการทดสอบตั้งแต่ 50 มก./100มล. ขึ้นไป (เมา)

1.5 คำแนะนำในการชาร์จ:

เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ ALCOHOL H3 แบตเตอรี่มีความจุขนาดใหญ่ในตัว ซึ่งให้เวลาสแตนด์บายได้นานถึง 1 เดือนหลังจากชาร์จเต็มแล้ว

เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ ALCOHOL H3 ใช้อินเทอร์เฟซการชาร์จมาตรฐาน USB Type-C ซึ่งมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือความเข้ากันได้สูงและความเร็วในการชาร์จที่รวดเร็ว คุณสามารถใช้ตัวแปลงการชาร์จ Type-C 5V หรือพาวเวอร์แบงก์ที่ตรงตามมาตรฐานระดับชาติเพื่อชาร์จเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ ALCOHOL H3 แต่การชาร์จด้วยตัวแปลงการชาร์จที่ต่ำกว่าอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดและเสียหายได้

2. ข้อควรระวังในการใช้

2.1 คำเตือนที่สำคัญ!

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม 20 นาทีก่อนการทดสอบ นี่คือการทั่วไปของเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ในลมหายใจทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้น เหตุผลหลักคือ หากคุณเพิ่งดื่มเสร็จ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตกค้างในปากของคุณจะสูงมาก ซึ่งจะทำให้ผลการทดสอบแสดงปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นอย่างมาก

2.2 อิทธิพลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายมนุษย์

แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจากปาก คอ กระเพาะอาหาร และลำไส้ แอลกอฮอล์ที่มนุษย์ดื่มเข้าไปจะตรวจพบในลมหายใจออกเนื่องจากมีอยู่ในเลือด เมื่อเลือดไหลผ่านปอด แอลกอฮอล์ในเลือดจะเดินทางผ่านเยื่อหุ้มของถุงลม (alveoli) ในปอด และเข้าไปในถุงลม ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในอากาศในถุงลมสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่ออากาศในถุงลมถูกหายใจออก อุปกรณ์ทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจสามารถตรวจจับแอลกอฮอล์ในอากาศได้

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในลมหายใจสัมพันธ์กับความเข้มข้นในเลือด ดังนั้นการวัดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในลมหายใจจึงสามารถระบุความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคลได้ โดยทั่วไปอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ในลมหายใจต่อแอลกอฮอล์ในเลือดคือ 2,000 : 1 ดังนั้น ปริมาณแอลกอฮอล์ในอากาศในถุงลม 2,000 มิลลิกรัมจึงใกล้เคียงกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 1 มิลลิกรัม

2.3 แอลกอฮอล์เป็นสารเคมี

แอลกอฮอล์เป็นสารเคมี (เอทานอล) ที่ผลิตขึ้นจากการหมักองุ่นหรือธัญพืช แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง ซึ่งจะเดินทางไปยังอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ดับจะขับแอลกอฮอล์ออกจากเลือดด้วยอัตราคงที่ และไม่มีสิ่งใดที่กักเก็บหรือดื่มเข้าไปเพื่อเร่งกระบวนการนี้ ดับจะทำการนี้โดยการออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ (เปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์) กาแฟหรือ "ยา" อื่นๆ จะไม่ทำให้คุณตื่นขึ้น เวลาเท่านั้นที่จะช่วยได้

2.4 แอลกอฮอล์ส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไร?

แอลกอฮอล์เป็นสารกดประสาท มีผลผ่อนคลายกล้ามเนื้อในร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนคลาย สูญเสียสมาธิ มองเห็นพร่ามัว และมองเห็นภาพซ้อน การทำงานของสมองช้าลง การตัดสินใจ การตอบสนอง และการประสานงาน ล้วนได้รับผลกระทบในทางลบ

ความบกพร่องทางการมองเห็นบางประการที่เกิดขึ้นหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่:

- การมองเห็นແບดลง การรับรู้ความลึกลดลง
- ลดการมองเห็นในที่มืด
- ความไวต่อแสงสะท้อนเพิ่มขึ้น ทำให้ดวงตาใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการปรับตัวจากแสงสะท้อน

ปฏิกิริยาและความรู้สึบบางอย่างอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์ เช่น:

- ความกระหนกั่วต่ออันตรายลดลง ความยากลำบากในการตัดสินใจ
- มีปฏิกิริยาช้า กลายเป็นคนมั่นใจเกินไปและหุนหันพลันแล่น
- สมดุลลดลง • การตัดสินใจลดลง

2.5 แอลกอฮอล์ส่งผลต่อการขับขี่ของเราอย่างไร?

ไม่ว่าเราจะเน้นย้ำถึงอันตรายจากการขับรถเมาสุราอย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถเน้นย้ำมากเกินไปได้ว่าสาตาและสมองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับขี่ปลอดภัย และการชนกันที่ร้ายแรงหรือเสียชีวิตก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้จากการเมาแล้วขับ

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ ALCOHOL H3 เป็นเครื่องมือในการพิจารณาว่าคุณสามารถขับขี่ยานยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือกระทำการอันตรายอื่นๆ ได้หรือไม่ ห้ามขับรถภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด หลังจากดื่มแล้ว อย่าลืมแต่งตั้งผู้ขับขี่

ผลกระทบของความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่แตกต่างกัน

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (หน่วย มก. / 100 มล.)	ผลกระทบ
20 – 30	ความตื่นเต้น การสูญเสียความเขินอาย
40 – 60	ผู้ดื่มจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น ผ่อนคลายร่างกาย ขับยังซ่งใจน้อยลง และรู้สึกอบอุ่น ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความจำของสมองลดลงเล็กน้อย ความ ระมัดระวังลดลง ระดับความมั่นใจในระดับนี้อาจส่งผลกระทบต่อทักษะในการขับขี่
70 – 90	การสูญเสียสมดุล การพูด การมองเห็น เวลาตอบสนอง และการได้ยินเล็กน้อย ความตื่นเต้น การตัดสินใจ และการควบคุมตนเองลดลง ความระมัดระวัง สติสัมปชัญญะ และความจำ ลดลง เมื่อมั่นใจในระดับนี้ ทักษะในการขับขี่จะลดลง
100 – 120	การประสานงานการเคลื่อนไหวลดลงอย่างมาก สูญเสียการตัดสินใจที่ดี พูดไม่ชัด การทรง ตัว การมองเห็น เวลาตอบสนอง และการได้ยินอาจได้รับผลกระทบ
130 – 150	การเคลื่อนไหวบกพร่องอย่างรุนแรงและควบคุมร่างกายไม่ได้ การมองเห็นพร่ามัว สูญเสีย การทรงตัว ความรู้สึกสบายลดลงและความวิตกกังวลเริ่มเกิดขึ้น
160 – 200	ความวิตกกังวลเป็นส่วนใหญ่ ร่วมกับการคลั่งไส้และความรู้สึกไม่สบายทางกายอื่นๆ
200 – 300	ต้องได้รับความช่วยเหลือในการเดิน สับสน มีอาการคลั่งไส้และอาเจียน
มากกว่า 300	หมดสติ โคม่า อาจถึงแก่ชีวิตจากภาวะหยุดหายใจได้

อย่างไรก็ตาม หากมีการดื่มแอลกอฮอล์ ทักษะการขับขี่ของคุณอาจลดลง การดื่มแล้วขับรถไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอน

3. การแก้ไขปัญหา:

อาการ	สารละลาย
แบตเตอรี่เหลือน้อย	ชาร์จอุปกรณ์ของคุณให้ทันเวลา
ไม่มีการตอบสนองเมื่อเป่าลมเข้าวัด	ท่อเป่าลมอุดตันด้วยสิ่งแปลกปลอมหรือมีน้ำลายเข้ามา ให้ทำความสะอาดท่อด้วยสาลิซบน้ำ
การทดสอบแอลกอฮอล์ไม่มีค่า	ตรวจสอบว่าท่อเป่าลมอุดตันหรือไม่ หากยังไม่สามารถวัดค่าได้หลังจากทำความสะอาด เช่น เซอร์จอาจเสียหาย
ไม่มีค่าตรวจแอลกอฮอล์	ตรวจสอบว่ามีน้ำตาและแอลกอฮอล์ตกค้างในปากหรือไม่ สูดบุหรืหรือไม่ หรือเพิ่งทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม หากตรวจไม่พบปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วและยังมีค่าอยู่ จะต้องส่งกลับโรงงานเพื่อปรับเทียบใหม่ แจ้งทางผู้ขายเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อปรับเทียบค่าใหม่ (ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับเทียบ)

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการทำงานของจิตใจหรือร่างกายของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หรือความสามารถในการระบุแอลกอฮอล์ในเลือดอาจส่งผลต่อร่างกายหรือไม่ หรือในระดับใด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ในลักษณะใดๆ ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ การกระทำใดๆ ที่อิงตามการอ่านค่าจากผลิตภัณฑ์นี้ควรเป็นความเสี่ยงของบุคคลหรือผู้ใช้เอง ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และของบุคคลที่ภายหลังพบว่ามีการมีนเมาจากแอลกอฮอล์ หรือผู้ที่พิจารณาแผนหรือการทำงานของจิตใจหรือร่างกายบกพร่องจากแอลกอฮอล์

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถานะสุขภาพของบุคคล การอ่านค่าแอลกอฮอล์ต่ำ/ระยะเวลาที่เล็กน้อยได้สันไม่ได้หมายความว่าสมรรถภาพทางร่างกายหรือจิตใจหรือการตัดสินใจ (รวมถึงเวลาตอบสนอง) ของบุคคลนั้นสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้

5. ชื่อและเนื้อหาของสารอันตรายในผลิตภัณฑ์

ชื่อชิ้นส่วน	สารที่เป็นอันตราย					
	ตะกั่ว	ปรอท Hg	แคดเมียม ซีดี	มิงเฮกซะวาเลนต์ (Cr(VI))	โพลีออกซีไบฟีนิล (PBB)	ไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0
สายชาร์จ	0	0	0	0	0	0

ตารางนี้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติของ SJ/T11364

0 : ระบุว่าเนื้อหาของสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดของชิ้นส่วนนั้นต่ำกว่าข้อกำหนดชนิดจำกัดที่ระบุไว้ใน GB/T26572

X : ระบุว่าปริมาณสารพิษและสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชนิดของชิ้นส่วนนี้เกินข้อกำหนดชนิดจำกัดที่ระบุใน GB/T26572

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน EU RoHS2.0 (2011/65/EU)

ไอคอน 10 ปีหมายถึง "ระยะเวลาการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ไม่ใช่ระยะเวลาการรับประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ "ระยะเวลาการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" หมายความว่าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จะต้องใช้งานภายในระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ และบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อีกต่อไปหากมีความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยเกินระยะเวลาการใช้งานที่ปลอดภัย

6. การบริการและการรับประกัน

บริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์อัจฉริยะ ALCOHOL H3 ยึดตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื้อหาการบริการมีดังนี้:

นโยบายการรับประกัน

1. การคืนสินค้า เนื่องจากสินค้ามีปัญหา ต้องส่งคืนภายใน 7 วันนับจากวันหลังจากได้รับสินค้า (ทุกช่องทางการสั่งซื้อ) และค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบ

2. หากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพดังที่แสดงไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์" หรือได้รับการยืนยันจากแผนกเทคนิคหลังการขายของบริษัทว่าอุปกรณ์มีข้อบกพร่องและความเสียหายจากทางผู้ผลิต อุปกรณ์นั้นจะได้รับการซ่อมแซม ทดสอบ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติต่อไป (ฟรี)

คำเตือน: เนื่องจากต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง จึงขอแนะนำให้ลูกค้าเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ได้รับ

กรณีการไม่รับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การใช้งานที่ผิดวิธี การละเลย การรั่วไหลของของเหลว การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. การสึกหรอตามปกติ รวมทั้งรอยแตก รอยขีดข่วน รอยถลอก การเปลี่ยนสี หรือสีซีดจาง

3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในใบรับประกันไม่ตรงกับการระบุทางกายภาพของผลิตภัณฑ์หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

4. ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความล้มเหลวในประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางความล้มเหลวในประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์"

5. ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

6. ได้เกินระยะเวลาการรับประกันแล้ว (รับประกัน 7 วัน)

7. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมมีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพดังที่แสดงไว้ใน "ตารางข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์" เนื่องจากปัจจัยด้านมนุษย์

7. พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อสินค้า: เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์แบบพกพา

รุ่นสินค้า: H3

เซ็นเซอร์: เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ชนิดเซลล์เชื้อเพลิง (ไฟฟ้าเคมี)

เวลาในการเป่า: 3 วินาที

เวลาดอบสนอง: 1 - 15 วินาที

ช่วงการวัด: 0 - 400มก./100มล.

ขนาดสินค้า: 42*70*11 มม.

แบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟ: 300 mAh

วิธีการชาร์จ: ประเภท - CDC5V/1A

เวลาในการชาร์จ: 1 ชม.

วัสดุเปลือก: พลาสติกวิศวกรรม ABS

จอแสดงผล: จอแสดงผลสี TFT ขนาด 0.96 นิ้ว

การใช้งานปุ่ม: การใช้งานปุ่มเดียว

การสื่อสารไร้สายบลูทูธ: BLE5.0

สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิ: 0 - 45 องศา ความชื้น: 35 - 85%

รายการบรรจุภัณฑ์:

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

สายชาร์จ USB TYPE-C หนึ่งเส้น

ปากเป่า 5 อัน

คู่มือ